



Medicom Flagship model
ロングセラーの医療用グローブ



Pride in Protection™

私たちメディコムジャパンは
世界標準の品質で感染管理をリードします。

メディコムジャパン(A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド)は、カナダのモントリオールを本社とし、医療現場になくてはならない感染管理のための製品を製造販売するヘルスケア企業です。感染管理の先進国である北米の基準や知識が反映された、高い品質と洗練されたデザインが特徴であるメディコムの製品群は、世界約100カ国に提供されています。



SafeTouch
LATEX GLOVE

Textured Latex Medical Examination Gloves
セーフタッチ ラテックスグローブ

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074 [サイトはこちらから▲](#)

✉ info@medicom-japan.com www.medicom-japan.com



※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2024.11.06

指先の動きを ダイレクトに伝える

「セーフタッチ ラテックスグローブ」は、ハンドファイルなどの器具使用時にグローブの巻き込みを軽減し、スムーズな操作性を実現した医療用ラテックスグローブです。

術者の動きをダイレクトに器具に伝えることができるため、手技のパフォーマンス向上が期待できます。

根管治療



矯正治療



巻き込みの軽減と、スムーズな着用

両面塩素加工を施しさらりとした質感に仕上げること、器具使用時にグローブの巻き込みを軽減し、スムーズに着用することができます。

優れた引張強度と伸張性 (ASTM 3578適合)

医療用手袋の国際規格値以上の引張強度と伸張性を有し*、術者の手技をサポートします。*当社実測値

皮膚への低刺激性 (ISO 10993適合)

「皮膚への刺激性試験」および「水溶性たんぱく質の溶出量測定」の結果において、国際規格ISO 10993の医療機器基準を満たしています。



高い引張強度と伸張性


両面塩素加工とは？

グローブを塩素水で洗浄することです。「セーフタッチ ラテックスグローブ」はこの加工をグローブの内側・外側の両面に施すことで、操作性の向上とスムーズな着用を実現しました。表面を硬化させ、ラテックス(天然ゴム)特有のべたつきを抑えることができ、パウダーがなくてもさらりとした質感になります。また、その加工工程でラテックスに含まれる水溶性たんぱく質も減らすこともできます。

品名：セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー

パウダーフリー		未滅菌	両面塩素加工	すべり止め	左右兼用	単回使用
品番	サイズ	掌部幅	全長	カラー	入り数	JANコード
1124Z	XXS	約65mm	240mm以上	ナチュラル	10箱/ケース (100枚/箱)	4897008632724
1124A	XS	約75mm				4897008632731
1124B	S	約85mm				4897008632748
1124C	M	約95mm				4897008632755
1124D	L	約106mm				4897008632762

販売名：セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号：28B3X00001000055

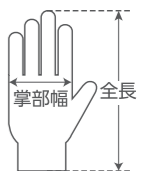

SafeTouch 高品質の世界ブランド セーフタッチ

メディコムの創業者ロナルド・ルーベンは、エイズ危機によって医療従事者用の個人防護具が緊急に必要とされているという問題を解決するため、高品質の診察用手袋の開発に取り組み、セーフタッチブランドを誕生させました。彼は、最先端の技術・最高品質の原材料を用い、一流の科学者と共に高品質な個人防護具を設計・開発。メディコムは世界中の医療従事者の信頼を得ることになりました。セーフタッチは高品質ラインのブランドとして、医療従事者からの高い支持を受け、今なお成長を続けています。

