

SafeSeal Sterilization Wrap

滅菌ラップ | 未滅菌




安全な手術のために

「セーフシール 滅菌ラップ」は、手術の安全性と再生処理業務に従事する方々の作業性を考えた、柔軟性とバリア性を兼ね備えた滅菌ラップです。

SMMS 4層構造の 優れた強度と高いバリア性

強度と撥水性に優れたスパンボンド層(S)を外側、微生物や微粒子に対するバリア性が高く柔軟性を有するメルトブロー層(M)を内側に配したSMMS 4層構造で、強度と柔軟性、そしてバリア性を有しています。

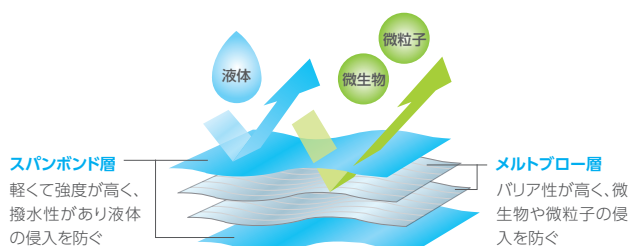

柔軟性

医療機器を包みやすい柔軟な素材を使用しています。

帯電防止加工

微粒子や埃が付着しにくく作業がしやすいよう、帯電防止加工を施しています。

低リント性

リントが発生しにくい医療グレードのポリプロピレンを使用しており、単繊維(セルロース)を含んでおりません。

オートクレーブ・EOガス両用

クラスB滅菌器対応

過酸化水素ガスプラズマ滅菌用

過酸化水素ガス滅菌用

帯電防止加工

品名:セーフシール 滅菌ラップ

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
GSR450600	60×60cm	250枚	1パック	4894476035323
GSR450750	75×75cm	100枚	2パック	4894476035309
GSR450900	90×90cm			4894476035316
GSR450120	120×120cm	25枚	4パック	4894476035293
GSR450140	140×140cm			4894476035255



オートクレーブ
EOガス両用

過酸化水素ガス
プラズマ滅菌用

過酸化水素ガス
滅菌用

販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲