

Safe+Mask Premier

メディコムセーフマスクプレミア
ラテックスフリー



ASTM F2100-19対応サージカルマスク 高い防護性能と豊富なカラーバリエーション

- ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応したサージカルマスクです。
- 液体防護性に優れ、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります(人工血液バリア性 $\geq 80\text{mmHg}$)。
- 高性能フィルター内蔵で、 $\text{BFE} \geq 99\%$ *の高精度を実現しています。*当社調べ
- ノーズピースはアルミニウム製で、顔にぴったりとフィットし防護性を高めます。
- 耳ひもは耳への負担が少ない平型で、ポリエステル製(ラテックスフリー)です。

内側

спанbond不織布

ASTM(アメリカ試験材料協会)高レベル汚染防御規格対応の撥水能力素材。肌に触れても毛羽立たず、すべすべした肌触りの良い不織布を使用しています。

アルミニウム製ノーズピース

長くて丈夫なノーズピースにより、マスクの密着性を最大限に高めています。

外側


耳ひも

丈夫でソフトなラテックスフリー素材。皮膚に刺激を与えないよう、マスク外側に取り付けられています。ミシン目穴や接着不良が発生しにくい超音波溶着方式でマスクと一体化させています。

中心

メルトブロー不織布

ポリマーを高圧で押し出しながら熱風で吹き飛ばして作る、軽くてフィルター性が高い極細繊維の不織布を使用しています。

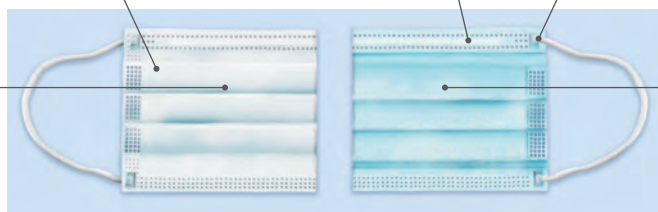

спанbond不織布

軽くて強度がある不織布を使用。撥水性の高い特殊素材が、バクテリアを含んだ水溶液などが口の周りやマスクに覆われている皮膚に付着するのを防ぎます。



品名:セーフマスク プレミア

| 品番 | カラー | サイズ | 入り数(箱) | 入り数(ケース) | JANコード |
|------------|-------|-----------|--------|----------|---------------|
| PMR002014M | ホワイト | 約89×178mm | 50枚 | 10箱 | 4897008632878 |
| PMR002015M | ブルー | | | | 4897008632885 |
| PMR002016M | ピンク | | | | 4897008632892 |
| PMR002017M | イエロー | | | | 4897008632908 |
| PMR002018M | グリーン | | | | 4897008632915 |
| PMR002011M | ラベンダー | | | | 4897008632861 |

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲