

[デンタル] サージカルマスクのご紹介

Surgical Mask

**ASTM F2100
Level 3,2**
歯科診療におけるサージカルマスクの選択基準

	曝露リスク	水量	治療・処置例			対応マスク
ASTM F2100 LEVEL 3	 高い処置	 多い処置	 外科処置	 レーザー治療	 スリーウェイ シリンジ使用時	 セーフマスク プレミアエリート
ASTM F2100 LEVEL 2	 中程度の処置	 中程度の処置	 ホワイトニング	 インプラント 観血的処置	 ハンドピース使用時	 プロレーン®マスク LEVEL-2
ASTM F2100 LEVEL 1	 少ない処置	 少ない処置	 矯正治療 (スプレーなし)	 フッ素塗布	—	  プロレーン®マスク プロレーン®マスク リラックス   プロケアマスク セーフマスク®プレミア アンチフォグマスク

■ 最高の防護レベル
■ ASTM F2100 Level 3


ブルー


セーフマスク プレミアエリート

 【構造】飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)
 【ろ過精度】BFE≥99% PFE≥99% (0.1μm) 【呼吸抵抗】ΔP<5.0

ノーズピース:PVCコート鉄線 下向きフリーズ 耳紐:平ゴムタイプ

- やわらかく呼吸のしやすいマスク生地。
グラスファイバー不使用で、敏感肌の方にもおすすめです。
- 高いろ過精度を持つ高性能フィルター使用。
- 抜群の液体防護性があり、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。

品番	カラー	サイズ	入り数
GMK201915	ブルー	89×178mm	10箱/ケース (50枚/箱)

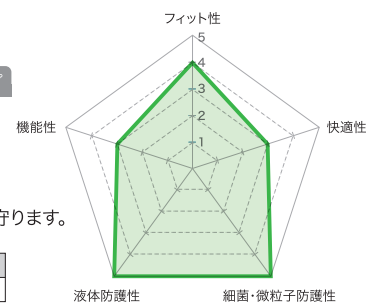
■ 抜群のフィット性による安心感
■ ASTM F2100 Level 2


プロレーン®マスク LEVEL-2

 【構造】飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)
 【ろ過精度】BFE≥99% PFE≥99% (0.1μm) 【呼吸抵抗】ΔP<4.0

ノーズピース:アルミニウム板 下向きフリーズ 耳紐:平ゴムタイプ

- 高いろ過精度を持つ高性能フィルター使用。
- 抜群の液体防護性があり、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。

品番	カラー	サイズ	入り数
PLEJMK2883	ホワイト	89×178mm	10箱/ケース (50枚/箱)

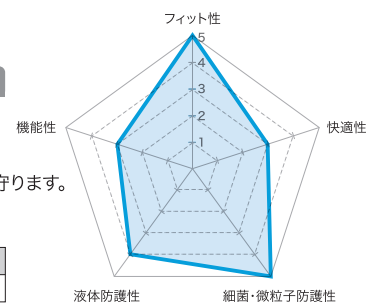

[デンタル] サージカルマスクのご紹介

Surgical Mask

 ASTM F2100
 Level 1

高性能スタンダードタイプ



 ホワイト
 ブルー
 ピンク

プロレーン®マスク

 【構造】飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)
 【ろ過精度】BFE≥99% PFE≥99% (0.1 μm) 【呼吸抵抗】ΔP<4.0

ノーズピース:アルミニウム板 下向きプリーツ 耳紐:平ゴムタイプ

品番	カラー	サイズ	入り数
PLE0002714	ホワイト	89×178mm	10箱/ケース (50枚/箱)
PLE0002715	ブルー		
PLE0002716	ピンク		
Sサイズ			
PLE002714S	ホワイト	89×165mm	10箱/ケース (50枚/箱)
PLE002716S	ピンク		

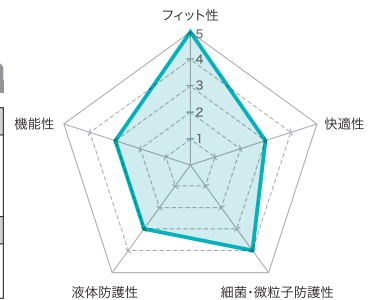

快適さと防護性の融合



 ホワイト
 ブルー
 ピンク

プロレーン®マスク リラックス

 【構造】飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)
 【ろ過精度】BFE≥99% PFE≥99% (0.1 μm) 【呼吸抵抗】ΔP<4.0

ノーズピース:アルミニウム板 立体プリーツ 耳紐:幅広ソフトゴム

品番	カラー	サイズ	入り数
PLEJMA2714	ホワイト	89×178mm	10箱/ケース (50枚/箱)
PLEJMA2715	ブルー		
PLEJMA2716	ピンク		
Sサイズ			
PLEJM2714S	ホワイト	89×165mm	10箱/ケース (50枚/箱)
PLEJM2716S	ピンク		

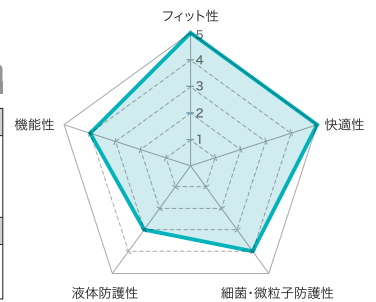
 使いやすく汎用性に優れた
 レベル1マスク


プロケア イヤーループマスク

 【構造】飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)
 【ろ過精度】BFE≥99% PFE≥99% (0.1 μm) 【呼吸抵抗】ΔP<5.0

ノーズピース:PVCコーティングのWワイヤー

下向きプリーツ 耳紐:幅広ソフトゴム

品番	カラー	サイズ	入り数
JMK211683	ホワイト	89×175mm	1ケース/40箱(1箱/50枚)
Sサイズ			
JMK211683S	ホワイト	89×165mm	1ケース/40箱(1箱/50枚)

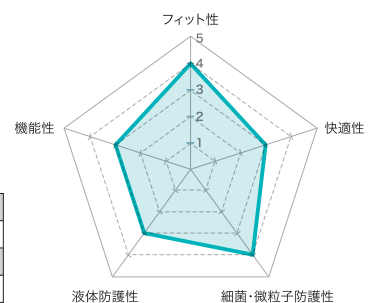
 眼鏡が曇りにくい
 アイウェアやスコープ使用時にも

セーフマスク プレミア アンチフォグ マスク


 【構造】飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)
 【ろ過精度】BFE≥97% PFE≥99% (0.1 μm) 【呼吸抵抗】ΔP<4.0

JIST9001 医療用マスククラス I アンチフォグ加工

ノーズピース:アルミニウム板 下向きプリーツ 耳紐:幅広ソフトゴム

- マスクの内側に二重メッシュの折返しをつけることで、呼吸漏れを軽減する、メガネが曇りにくいマスク。

品番	カラー	サイズ	入り数
PMRJMK2383	ホワイト	89×178mm	10箱/ケース (50枚入り/箱)

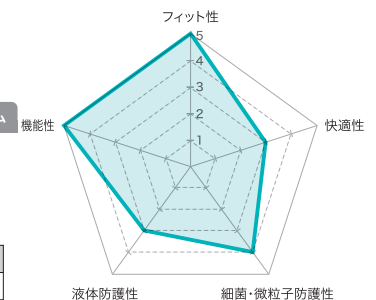

ASTM F2100 Level 1

JIS T9001