

SafeSeal[®]

滅菌ラップ

～約11kgまで

整形外科や循環器系の約11kgまでの非常に重い器材までカバー

品番	サイズ	入り数
GSR450600	60×60cm	1パック/ケース (250枚/パック)
GSR450750	75×75cm	2パック/ケース (100枚/パック)
GSR450900	90×90cm	2パック/ケース (100枚/パック)
GSR450120	120×120cm	1パック/ケース (100枚/パック)
GSR450130	137×137cm	1パック/ケース (100枚/パック)



SafeSeal[®]

滅菌ラップ

発売元 A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website



 **Medicom[®]**
Pride in Protection[™]

高い強度とバクテリアバリア性で 整形器材に最適。


- ・ISO 11607-1およびEN 868-2-2017に準拠しています。
- ・医療グレードのポリプロピレン製
- ・セルロースは含まれません。
- ・帯電防止加工を施しており、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。



1 5層構造による優れたバリア性能 (BFE99%以上)

強度に優れた SMMMS5 層構造

SMMMS5層構造のため、強度とバクテリアバリア性に優れています。

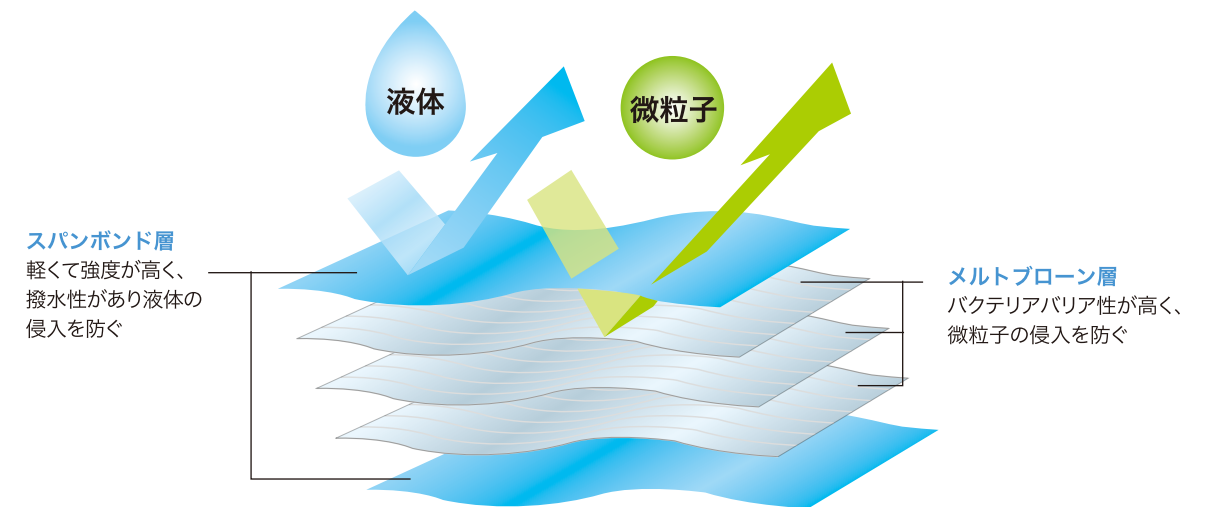

2 優れた無菌性の維持

被滅菌物(医療機器等)が少なくとも180日間は無菌状態を維持することが証明された
(ネルソン研究所によるテスト)

3 低リント

感染の原因となるリントを極限まで低くおさえた素材を使用しています。

4 優れた強度

3層のメルトブロー層を2層のスパンボンドで挟んでいます。

スパンボンド繊維は引き裂き、引張り、破裂、摩耗に対して優れた強度があります。