

防護性と
快適さの融合

SafeWear

Disposable Surgical Gown (Sterile)

セーフウェア サージカルガウン

ANSI / AAMI PB70 Level 3



AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン

メディコム「セーフウェア サージカルガウン」はガウンの国際規格であるAAMI PB70 レベル3に適合したサージカルガウンです。高い防護性を備えながら、軽量かつ快適な通気性で長時間の手術での着用性にも配慮しました。

吸水性に優れた滅菌タオル2枚入

素早い拭き上げが可能です。また、清潔区域での清拭にご利用いただけます。

マスク無・有の2パターン

「マスク無し」に加え、「マスク有り」もご用意いたしております。

BLUE | ブルー

STERILE | EO



Not Made
With Natural
Rubber Latex

ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能




製品を取り出した状態で、写真のように両側の隙間に手を入れます。




そのまま手を広げるように開いていくと、清潔かつスピーディーに袖通しが行えます。

防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン

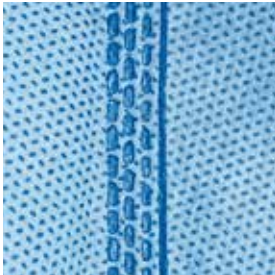

伸張性と強度に優れた4列超音波シールで接合部からの液体の侵入を防ぎます。

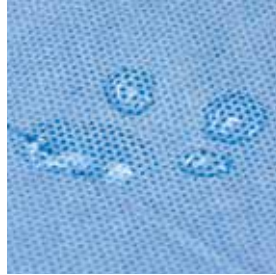

高い液体防御性を発揮し、手術時の曝露を抑制します。



着脱が容易な面ファスナーを採用。着用時間の短縮に繋がります。



通気性に優れ、リントの発生も抑えた素材です。

AAMI PB70 Level 3

規格	試験内容	要求条件	試験結果
AATCC 42	衝撃撥水試験	浸透性 \leq 1.0g	✓ 適合
AATCC 127	静水圧撥水試験	静水圧撥水性 \geq 50cm	✓ 適合

難燃性およびレーザー耐性

規格	試験内容	要求条件	試験結果
16 CFR 1610	可燃性試験	CLASS1	✓ 適合
ISO 11810	レーザー耐性試験		✓ 適合

	品番	サイズ	カラー	入り数	定価
マスク無し	SFWGSG834C	M	ブルー	50枚/箱	オープン
	SFWGSG834D	L			
	SFWGSG834E	XL			
マスク有り	SFW-JSG710023C	M			
	SFW-JSG710023D	L			
	SFW-JSG710023E	XL			

●滅菌タオル2枚付き



発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

