

**SAFE+MASK**  
**PREMIER**  
**ELITE**

セーフマスクプレミアエリート

サージカルマスク最大級の  
防護性能と着用性

ASTM F2100  
**LEVEL 3** 適合

Medicom「セーフマスクプレミアエリート」はサージカルマスクの国際規格である ASTM F2100 レベル3に適合した優れた液体防護性を有しながらも、同時に規格値を上回る快適な着用性も兼ね備えた高機能なサージカルマスクです。

品番	カラー	サイズ	入り数
GMK201915	ブルー	89×178mm	10箱/ケース (50枚/箱)



SAFE+MASK

# PREMIERELITE

## セーフマスクプレミアエリート


撥水性と肌触りに優れた、特殊加工のспанボンド不織布を採用。液体の浸透を最大限に防ぎます。

高品質中間フィルターはBFE(細菌濾過効率)PFE(微粒子濾過効率)ともに99%以上の捕集効率を發揮します。さらに通気性にも優れています。

PVCコートワイヤーノーズピースにより、高いフィット性が持続します。


飛沫や微粒子の滞留を防ぐシングルプリーツデザイン。プリーツのひだが下向きになるように着用下さい。

マスクの外側に超音波溶着されたイヤーループは溶着面が肌に触れないため、皮膚への負担を軽減します。また、平型で伸縮性が高く、耳が痛くならない設計となっております。

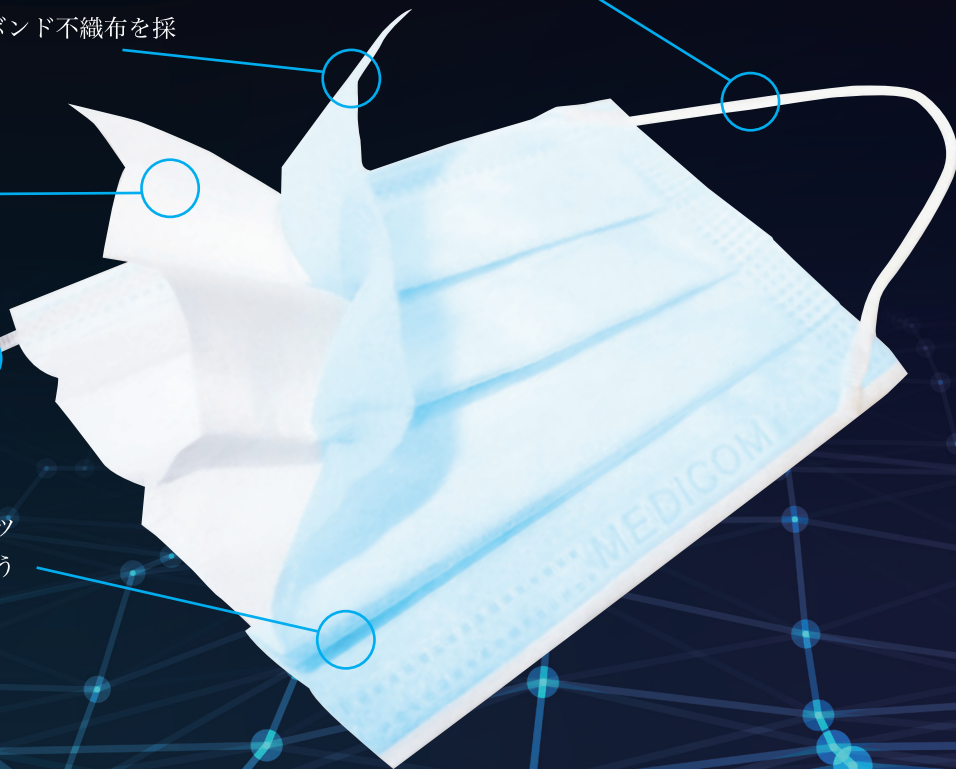

一部の性能において  
ASTM F2100

## LEVEL 3を上回る性能。

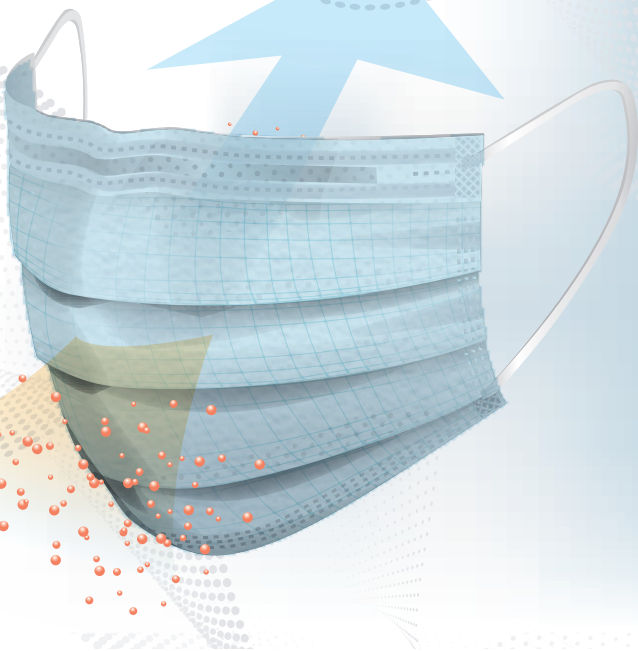

セーフマスク プレミアエリートは一部の性能において  
ASTM F2100 レベル 3 の基準値を上回る  
性能を有しています。

要求事項	ASTM F2100 LEVEL 3	
	基準値	セーフマスク プレミアエリート
細菌濾過率(%) BFE	≥98.0%	≥99.0%
微粒子濾過率(%) PFE	≥98.0%	≥99.0%
呼吸抵抗(mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	< 6.0	< 5.0
血液不浸透性(mmHg)	≥ 160mmHg	≥ 160mmHg
燃焼性	Class1	Class1

### ASTM F2100 とは

FDA(米国食品医薬品局)は、ASTM規格を医療用マスクの米国承認規格としています。ASTM F2100規格は、患者のケアや手術に使用される医療用フェイスマスクの性能要件と試験方法を示しています。要求される性能は、細菌濾過性能(3μm)、微粒子捕集効率(0.3μm)呼吸抵抗(ΔP)また、人工血液の浸透に対する防護性や難燃性も考慮されます。この5項目の要求事項に3段階のレベルを設定しています。

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代 表】 TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323  
【メディカル事業部】 TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112  
【デンタル事業部】 TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

メディコムジャパン

Website

