

**SafeSeal**

# Sterilization Double Wrap

ダブル滅菌ラップ | Non-Sterile 未滅菌

**BLUE + GREEN**オート  
クレープ用

EOガス用

過酸化水素ガス  
プラズマ滅菌用過酸化水素ガス  
滅菌用

## スピーディーで効果的な梱包を実現

「セーフシール ダブル滅菌ラップ」は、SMMS 4層構造のブルーとグリーンの滅菌ラップを超音波で圧着しています。そのため、一度の作業で二重包装が可能になり、作業時間を大幅に短縮できます。さらに、柔らかくしなやかな生地なので折り畳みやすく、作業性に優れます。感染対策、作業効率の面で利便性の高い製品です。

### 二重包装のメリット

- 滅菌性の維持の確実化（バリア性の強化）
- 安全性の向上、保護特性の強化（破損、破れ、などの物理的ダメージの軽減）
- 耐荷重性の強化



柔らかくしなやかな生地

# 破れや穴あきを見落としにくく、色分けで中身の識別が容易に

ブルーとグリーンの色違いのラップを超音波で圧着し重ねているため、破れや穴あきが発生しても見落としにくい利点があります。

また、2色であることを生かして、貸出用医療機器と病院の医療機器との区別など、用途別に使い分けすることも可能です。



ブルーを表にした場合




グリーンを表にした場合



## SMMS 4層構造の優れた強度と高いバリア性をダブルで

強度と撥水性に優れたスパンボンド層(S)を外側、微生物や微粒子に対するバリア性が高く柔軟性を有するメルトブロー層(M)を内側に配したSMMS 4層構造で、強度と柔軟性、そしてバリア性を有しています。

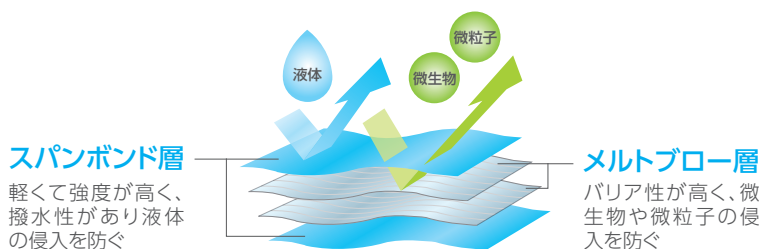

### 高いバリア性

バリア性の高いSMMS不織布を2枚重ねることで、より高いバリア性を実現します。

### 柔軟な素材

包みやすい柔軟な素材を採用。折り畳む際の反発が起こりにくいため作業性に優れています。

### 低リント性

リントが発生しにくい医療グレードのポリプロピレンを使用、単繊維(セルロース)を含んでおりません。

オートクレープ用

EOガス用

過酸化水素ガスプラズマ滅菌用

過酸化水素ガス滅菌用

品名：セーフシール ダブル滅菌ラップ

| 品番        | 厚み    | サイズ       | 入数(パック) | 入り数(ケース) | JANコード        |
|-----------|-------|-----------|---------|----------|---------------|
| JSR453900 | レギュラー | 90×90cm   | 100枚    | 2パック     | 4894476041416 |
| JSR453120 |       | 120×120cm | 25枚     |          | 4894476041423 |
| JSR453140 |       | 140×140cm | 10枚     | 5パック     | 4894476041393 |
| JSR454120 | ヘビー   | 120×120cm | 25枚     | 2パック     | 4894476041331 |
| JSR454140 |       | 140×140cm | 10枚     | 5パック     | 4894476041447 |
| JSR454150 |       | 150×150cm |         |          | 4894476041379 |



ブルーを表にした場合



グリーンを表にした場合

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.09.11